

Jato de Bicarbonato

Praticidade, design e ergonomia formam este aparelho para profilaxia dentária.

O Practical Jet como principal função o jateamento de superfícies utilizando bicarbonato de sódio, onde através de um sistema de geração de partículas de bicarbonato de sódio em suspensão inseridas em um jato de ar comprimido, obtém-se o complemento ideal da profilaxia dentária iniciada com a remoção de tártaro e outras impurezas.

Conjunto mecânico, sem alimentação elétrica, alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido.


A colocação do pó de bicarbonato de sódio é através de um reservatório localizado na parte superior do equipamento com uma tampa transparente (disponível em várias cores) para melhor visualizar a quantidade de pó disponível.

Fácil instalação:

- Utiliza o próprio encaixe borden do equipo.
- Utiliza o próprio pedal do equipo.
- Não necessita de adaptações externas de água e ar.
- Possui válvula anti-refluxo de pó.

Garantia: 12 meses

MODERNO SISTEMA PARA
PROFILAXIA DENTÁRIA DE FÁCIL
MANUSEIO E INSTALAÇÃO

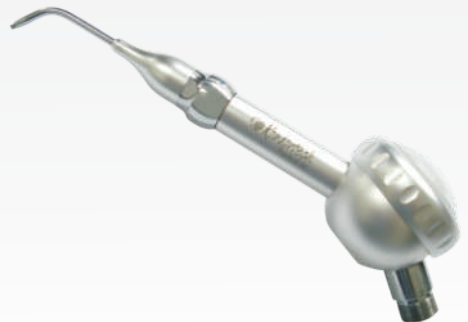

Jato uniforme

Classificação do produto segundo a ANVISA	
Classe de risco ANVISA	2 (médio risco)
Pressão de entrada de água (regulada no equipo)	20 a 40 PSI
Pressão de entrada do ar comprimido (regulada no equipo)	30 PSI - 40 PSI
Máxima vazão de água do spray	0,2mL/segundo
Máxima vazão de pó do spray	0,03 g/segundo
Acionamento	Pedal do equipo
Embalagem	01 caixa de papelão

 **Kondortech**
Equipamentos Odontológicos Ltda.

Rua Gastão Vieira, 471 São Carlos SP
SAK 16 3373-7790 www.kondortech.com.br